


vetscan **IMAGYST**^{MD}

CYTOLOGIE NUMÉRIQUE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

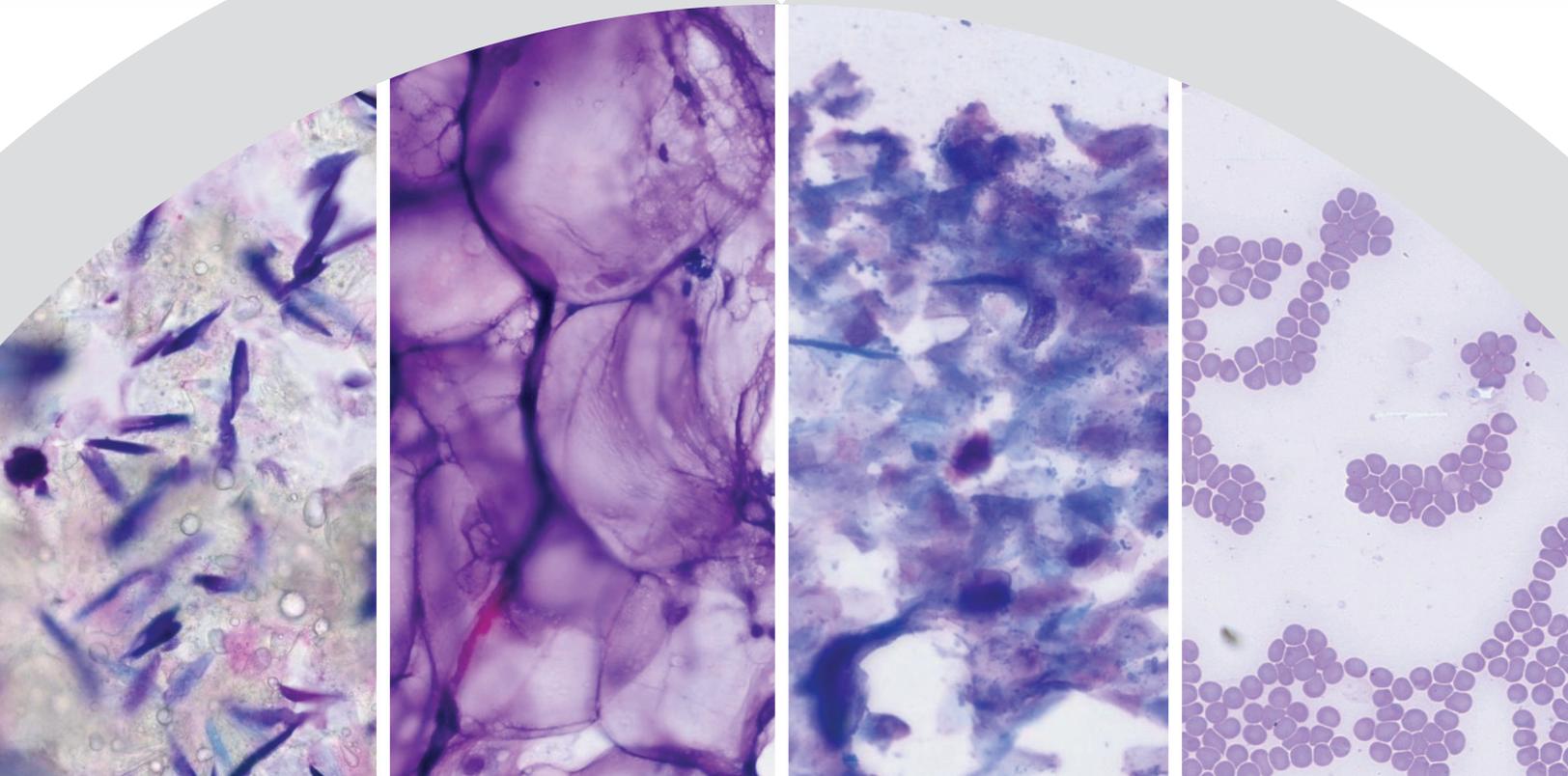

Obtenir des résultats de cytologie fiables grâce à Vetscan Imagyst^{MD}
vetscanimagyst.com

Des cytologies par des experts à portée de main


Vetscan Imagyst accélère le processus pour obtenir des résultats validés par des experts en pathologie clinique— il suffit de préparer et de numériser les lames, et ensuite de soumettre les images pour obtenir des résultats d'experts

01 PRÉPAREZ LA LAME DE CYTOLOGIE



- Préparez la lame conformément aux pratiques éprouvées pour la cytologie
- Ajoutez une goutte d'huile à immersion sur l'échantillon et placez une lamelle de 24 x 60 mm sur la lame
- Placez une étiquette ou une note manuscrite sur la lame
- Gardez les lames ensemble et bien organisées

02 CRÉEZ UNE DEMANDE

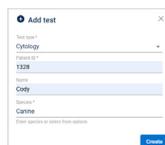

- Connectez-vous à VETSCAN IMAGYST
- Choisissez le bon échantillon et appuyez sur **ANALYSE**. Les informations de l'échantillon seront pré-remplies à partir de n'importe quel système logiciel connecté à Vetscan FUSE^{MD} ou Vetscan^{MD} Hub
- Si aucune intégration n'est disponible, sélectionnez **Ajouter un test (+)**
- Entrez tous les renseignements demandés, puis appuyez sur **CRÉER**

03 DONNEZ DES DÉTAILS SUR LE CAS



- Entrez la race, l'âge et le sexe du patient
- L'espèce est déterminée automatiquement
- Ajoutez une brève anamnèse
- Sélectionnez le service requis : Examen standard ou urgent


04 CRÉEZ LES SITES DES PRÉLÈVEMENTS

Sample Details



- Sélectionnez **AJOUTER UN LIQUIDE** ou **AJOUTER UNE LÉSION**
- Entrez l'information demandée
- Appuyez sur **CRÉER**
- Vous pouvez créer jusqu'à 2 sites de prélèvement différents
- Sélectionnez un exemple de carte afin d'ouvrir et modifier un exemple de site
- Pour retirer un site d'échantillon, ouvrez la carte de site d'échantillon et sélectionnez **SUPPRIMER (X)**

05 AJOUTER UNE NUMÉRISATION ANALYSES

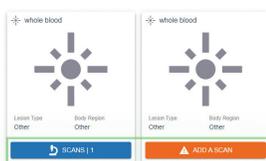

- Sélectionnez **AJOUTER UNE ANALYSE** ou **Analyses** pour ouvrir la fenêtre correspondante
- Sélectionnez un analyseur disponible
- Sélectionnez **OUVRIR LE PLATEAU** et placez la lame de cytologie sur le plateau, en la verrouillant en place

06 CIBLEZ LA ZONE DE LECTURE



- Appuyez sur **APERÇU** et évaluez la zone de numérisation suggérée
- Acceptez la zone d'analyse suggérée ou créez une zone d'analyse personnalisée pour réduire la durée d'analyse. Sélectionnez **CONTINUER** lorsque la zone de lecture vous convient
- Vous pouvez numériser 2 lames par site de prélèvement
- Appuyez sur **SUPPRIMER (X)** pour retirer une numérisation

07 SOUMETTEZ LA DEMANDE



- Pour aider le pathologiste à établir le diagnostic, joignez les photos (.jpeg) ou documents (.pdf) pertinents
- Vérifiez si le type de service de cytologie affiché au-dessus du bouton **ENVOYER LA COMMANDE** est correct.
- Appuyez sur **ENVOYER LA COMMANDE**

08 AFFICHEZ LES RÉSULTATS



- Lorsque les résultats sont prêts, appuyez sur **PRÊT POUR EXAMEN**
- Trouvez le test qui vous intéresse et appuyez sur **EXAMINER**
- Examinez les résultats
- Le test sera déplacé dans la section **HISTORIQUE DES TESTS**

TESTS INCOMPLÈTS

128 flutty
Cytology 8/18/2021 3:30 PM Species: Canine

Incomplete Test Order OPEN

- Un test incomplet ou non soumis affichera le statut de **Demande de test incomplète** dans la boîte de réception

- Sélectionnez **OUVRIR** pour remplir tous les champs obligatoires
- Passez en revue les étapes 3 à 7

Contactez votre représentant Zoetis afin d'obtenir de l'aide.

Pour obtenir du soutien produit, envoyez un courriel à Dxsupport.ca@zoetis.com (méthode préférée) ou appelez le 1-888-746-2395.