


vetscan **IMAGYST™**

CITOLOGIA DIGITALE

MANUALE DELL'UTENTE

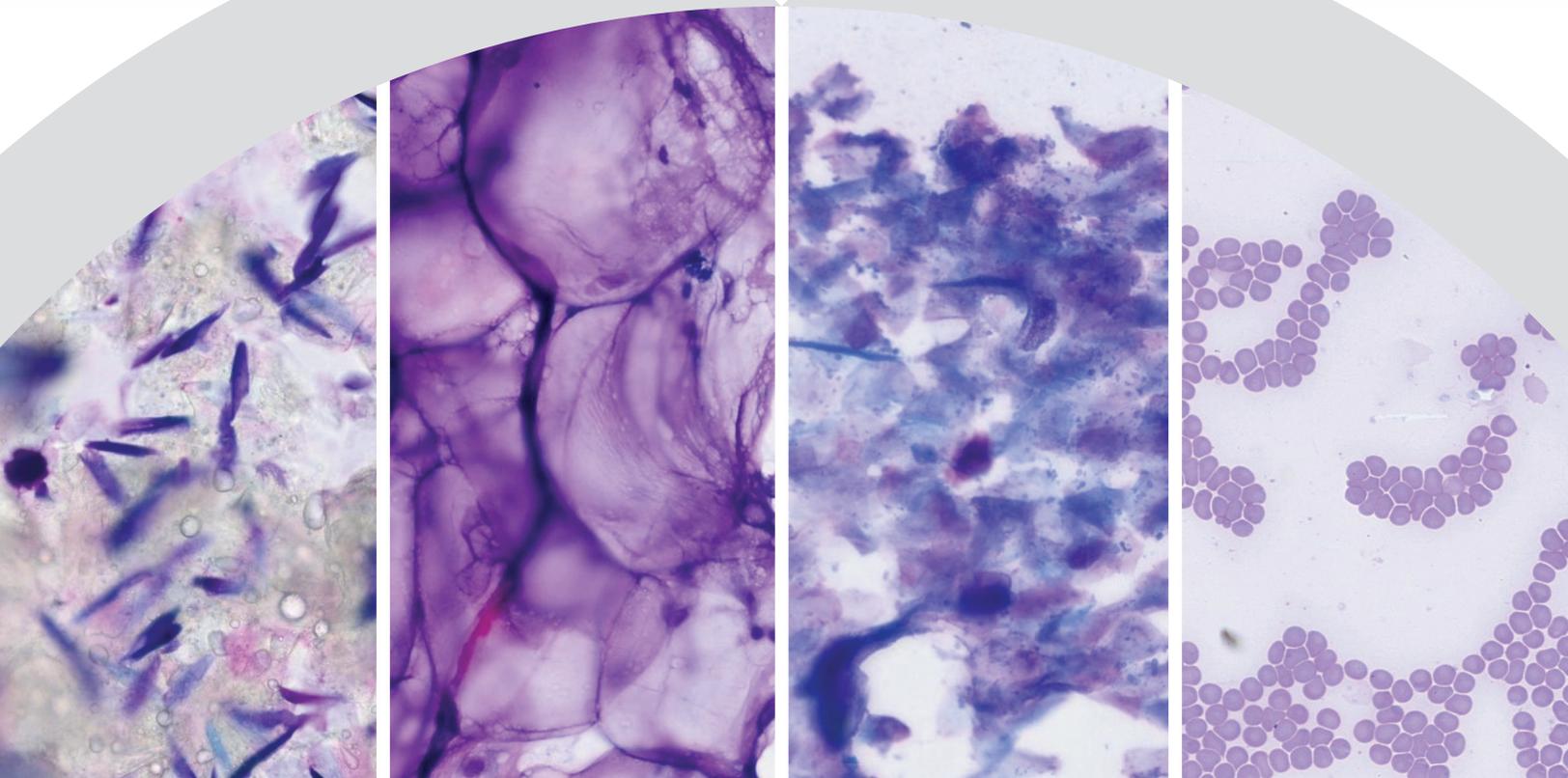

Iniziare a usare VETSCAN IMAGYST™ per risultati efficienti dell'esame citologico in sole poche ore
vetscanimagyst.com

Esame efficiente delle analisi citologiche da parte di un esperto

VETSCAN IMAGYST™ riduce i tempi di esame da parte di un patologo clinico esperto — è sufficiente preparare i vetrini, scansionarli e inviarli per ricevere risultati da un esperto nel giro di alcune ore

01 PREPARAZIONE DEL VETRINO PER LA CITOLOGIA



- Preparare un vetrino per citologia utilizzando le migliori pratiche del settore
- Includere un'etichetta o una nota scritta a mano sul vetrino
- Tenere i vetrini insieme e ben organizzati

02 AGGIUNTA DI UNA NUOVA ANALISI



- Accedere a VETSCAN IMAGYST
- Scegliere il campione corretto e selezionare **AVVIA**. Le informazioni sul campione vengono pre-compilate da parte di qualsiasi sistema software connesso a FUSE
- Qualora non sia disponibile alcuna integrazione, selezionare **Aggiungi nuova analisi (+)**
- Inserire tutte le informazioni richieste, quindi selezionare **CREA**

03 COMPILAZIONE DELL'ANAMNESI DEL PAZIENTE



- Immettere razza, età e sesso del paziente
- La specie del paziente è già impostata
- Inserire una breve anamnesi


04 AGGIUNTA DELLE SEDI DI PRELIEVO

Sample Details



- Selezionare **AGGIUNGI LIQUIDO** o **AGGIUNGI LESIONE**
- Inserire le informazioni necessarie
- Selezionare **CREA**
- Si possono impostare fino a 2 sedi di prelievo diverse
- Selezionare una scheda del campione per aprire e modificare una sede di prelievo
- Per rimuovere una sede di prelievo, aprire la relativa scheda e selezionare **ELIMINA (X)**

05 AGGIUNTA DI SCANSIONI

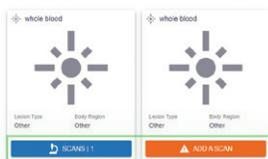

- Selezionare **AGGIUNGI UNA SCANSIONE** o **SCANSIONI** per aprire la finestra delle scansioni
- Selezionare uno scanner disponibile
- Selezionare **APRI VASSOIO** e collocare il vetrino per citologia sul vassoio, fissandolo in posizione

06 CREAZIONE DELL'AREA DI SCANSIONE



- Selezionare **ANTEPRIMA** ed esaminare l'area di scansione suggerita
- Accettare l'area di scansione suggerita o crearne una personalizzata per ridurre il tempo di scansione. Una volta selezionata l'area di scansione desiderata, selezionare **CONTINUA**
- Si possono scansionare 2 vetrini per sede di prelievo
- Selezionare **ELIMINA (X)** per rimuovere una scansione

07 INVIO DELL'ANALISI



- Per agevolare il patologo nella diagnosi, allegare documenti (.pdf) o fotografie (.jpeg) relativi all'anamnesi
- Selezionare **INVIA ORDINE**

08 ESAME DELLE ANALISI



- Quando un'analisi è pronta per l'esame, selezionare **PRONTO PER L'ESAME**
- Trovare l'analisi desiderata e selezionare **ESAME**
- Esaminare i risultati
- L'analisi sarà spostata su **CRONOLOGIA ANALISI**

ANALISI INCOMPLETE

128 fluffy
Cytology 8/18/2021 3:30 PM Species: Canine

Incomplete Test Order OPEN

- Un'analisi incompleta o non inviata presenterà lo stato **Ordine analisi incompleto** in Posta in arrivo

- Selezionare **APRI** per completare tutti i campi richiesti
- Rivedere i passaggi 3-7

Per assistenza, si prega di contattare il proprio rappresentante Zoetis.