

Análisis coherente del sedimento urinario

Vetscan Imagyst® ofrece un análisis confiable del sedimento urinario en el punto de atención, con resultados en cuestión de minutos y revisión experta complementaria cuando sea necesario¹

01 CENTRIFUGAR LA MUESTRA



- Determine si puede ser necesaria una dilución*
- Mezcle bien la muestra
- Transfiera 1, 2 o 3 mL al tubo de centrifugación
- Centrifugue, con el correspondiente tubo para mantener el equilibrio, durante 2 minutos a 450–500 RCF
- Permita que se detenga por completo

02 PREPARAR MUESTRA




- Coloque la punta de pipeta XactUrine® en la micropipeta
- Coloque la pipeta con su punta en el tubo
- Incline el tubo para verter el sobrenadante hasta que no se observe líquido por encima del tapón
- Vuelva a colocar el tubo en posición vertical
- Presione el émbolo 5 veces o hasta que se resuspenda el pellet

03 PREPARAR PORTAOBJETOS




- Coloque un portaobjetos preimpreso en el soporte
- Oriente el círculo de referencia hacia la parte inferior del soporte
- Rotule el portaobjetos con los datos del paciente en el borde esmerilado
- Una vez resuspendido el pellet, coloque 20 µL en el círculo de referencia
- Cubra con un cubreobjetos de 22x22 mm

04 AÑADIR NUEVO ANÁLISIS

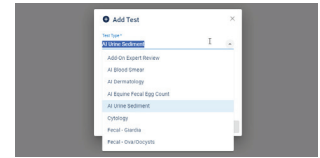


- Inicie sesión en Vetscan Imagyst
- Elija el análisis correcto y seleccione **ESCANEAR**. La información sobre la muestra se obtendrá a partir de cualquier sistema de software conectado a FUSE
- Si no hay disponible ninguna integración de la gestión de la clínica, seleccione **Agregar nuevo análisis (+)**

05 COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

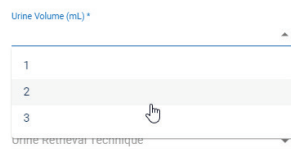


- Elija el volumen utilizado
- Introduzca el factor de dilución, si corresponde
- Introduzca cualquier información adicional, incluido el color y la claridad de la muestra

06 ESCANEAR PORTAOBJETOS

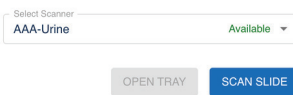


- Desbloquee el soporte del portaobjetos
- Coloque el portaobjetos en la bandeja con la etiqueta hacia la derecha
- Cierre el mecanismo de bloqueo
- Seleccione **ESCANEAR PORTAOBJETOS**

07 REVISAR RESULTADOS

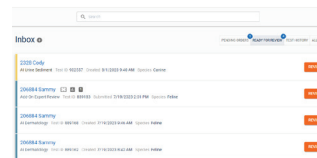

- Seleccione **REVISAR**
- Revise las imágenes obtenidas
- Seleccione manualmente imágenes adicionales para incluirlas en el reporte, si es necesario
- Para una vista más de cerca, seleccione **VER PORTAOBJETOS**
- **FINALICE** el reporte para pasarlo al **HISTORIAL DE ANÁLISIS**
- Seleccione **COMPARTIR** o descargue un PDF imprimible

08 REVISIÓN EXPERTA COMPLEMENTARIA** (OPCIONAL)

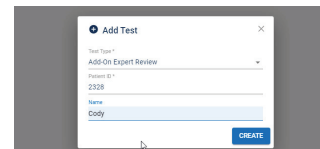

- Seleccione **Agregar nuevo análisis (+)**
- Elija la muestra
- Adjunte documentos del historial (.pdf) o fotos (.jpeg)
- Agregue un frotis de sedimento urinario teñido o un portaobjetos de preparación de la línea si está clínicamente justificado
- Seleccione **CERRAR** y luego **ENVIAR ORDEN**
- Busque los análisis deseados y seleccione **REVISAR**

09 CREAR PORTAOBJETOS TEÑIDO

- Mezcle bien el sedimento urinario restante
- Utilice una gota para crear un frotis o preparación de la línea
- Deje secar al aire

- Tíña el portaobjetos utilizando una tinción de tipo Romanowsky (p. ej., Diff-Quik®)
- Deje secar al aire

- Agregue una gota de aceite de inmersión
- Coloque un cubreobjetos de 24x60 mm utilizado para la Aplicación de citología digital

*Consulte la Guía de dilución

**Pueden aplicarse costos adicionales.

¹Datos en archivo, DHXMZ-US-23-218, Zoetis Inc.

Contacte a su representante de Zoetis para obtener asistencia.

Todas las marcas registradas son propiedad de Zoetis Services LLC o una empresa relacionada o un licenciatario, a menos que se especifique lo contrario.
© 2023 Zoetis Services LLC. Todos los derechos reservados. MM-28899

zoetis